



SCHMITZ

A Sense of Confidence

El equipamiento idóneo para clínicas y consultas de ginecología, urología y proctología



Catalogo nº 75
Válido a partir de mayo 2010

El programa de Schmitz para ginecología, urología y proctología

medi-matic® serie 115

Sillones de reconocimiento y tratamiento para ginecología, rectoscopia/proctología y para urología/urodinamica

páginas 4-19

arco

Sillones de reconocimiento y tratamiento para ginecología

páginas 20-25

arco

Sillones de reconocimiento y tratamiento para proctología

páginas 26-29

conzentrum®

Mobiliario modular de instalación fija

páginas 30-39

Orbit

Mobiliario modular móvil para trabajo y retirada

páginas 40-51

Combinaciones de colores páginas 52-53 **Ejemplos para medi-matic® serie 115 y arco**

Colores páginas 54-55
para barnizados, cueros artificiales, materias plásticas y encimeras



1



2



3

Serie medi-matic® 115

Más funcional, más flexible y más cómodo

CE

El sillón de reconocimiento y tratamiento para ginecología, rectoscopia y proctología

- Diseño elegante
- Placas apoya-pies ajustables eléctricamente (115.755)
- Altura, posición del asiento e inclinación del respaldo ajustables eléctricamente, con control de pie
- Colocación en posición de reconocimiento en pocos segundos
- Regulación de todos los movimientos del sillón, desde el mando a distancia
- Comodidad y ahorro de tiempo a través de teclas de memoria (115.725 + 115.755) y del movimiento simultáneo de los motores de ajuste
- Altura mínima muy baja para facilitar la subida de la paciente al sillón, sin peldaño
- Sistema de perneras fácilmente desmontable – especialmente ventajoso para pacientes en silla de ruedas y para traslado de pacientes.
- Calefacción de asiento integrada (opcional)
- Superficies lisas para fácil limpieza
- Amplia gama de colores para un ambiente atractivo
- Carga de trabajo segura 200 kgs.



Modelo 115.755 con perneras
101.442 y cojín 101.372

Colores:
Tapizado dorado 86
Barnizado partes metálicas
aluminio gris RAL 9007
Piezas de plástico gris plateado

Design: Rainer Schindhelm




El nuevo concepto futurista de mando para los sillones medi-matic®, modelos 115.725 y 115.755

- Display gráfico, iluminado, para todos los movimientos del sillón
- Chequeo electrónico
- 2 teclas adicionales, programables libremente, p. ej. para calefacción del asiento (ginecología) o para entrada de agua del lavado giroscópico (urología) y control de fuente de luz fría o colposcopio con 2 enchufes integrados 101.680
- Grabado con indicación de la función de memoria (hasta 8 posiciones)
- Reducción del tiempo por 50 % en los cambios de posición en los modelos 115.725 y 115.755
- Movimientos suaves y ergonómicos
- Control de los movimientos desde el control manual o desde el control de pie



Colores en la pantalla:
 azul: Ajuste respaldo
 amarillo: Ajuste asiento
 verde: Función memoria
 blanco: Ajuste perneras
 El color expuesto en la pantalla indica el modo de funcionamiento del control de pie.

Control de pie para los modelos 115.725 y 115.755 con recipiente de lavado giroscópico
 Entrada de agua mediante tecla de función adicional

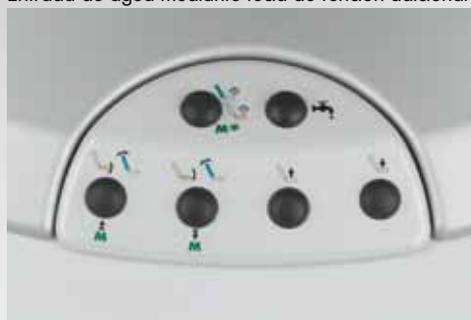

Control de pie para los modelos 115.725 y 115.755 control de los movimientos del sillón con el pie



Diferentes sistemas apoya-piernas





115.755 + 101.455 + 101.372




115.715 + 101.227 + 101.167 +
101.137 + 101.158 + 101.372



La pierna inferior de la paciente se
queda fijada lateralmente en la bandeja.

115.715 + 101.231 + 101.137 + 101.372

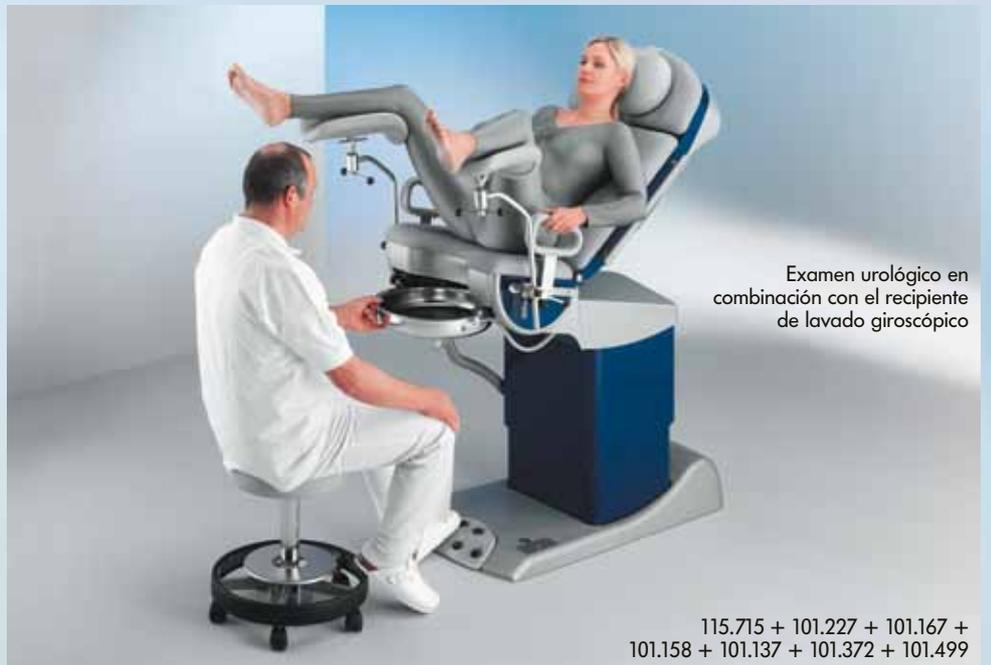


Examen urológico en
combinación con el recipiente
de lavado giroscópico

115.715 + 101.227 + 101.167 +
101.158 + 101.137 + 101.372 + 101.499

Nota:
Para los diferentes modelos de los taburetes de exploración
ver la página 15 en nuestro catálogo varimed n° 70.

Serie medi-matic® 115 para ginecología, rectoscopia y proctología y para urología/urodynamica

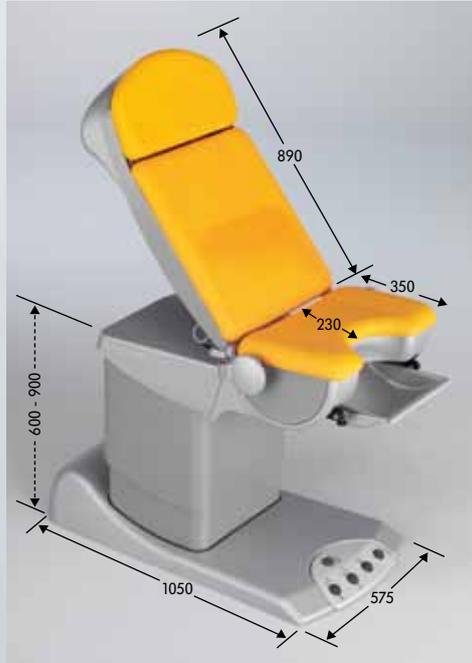

Referencia	Descripción
115.715	Sillón para reconocimiento y tratamiento Posición del asiento e inclinación del respaldo ajustables eléctricamente, altura regulable eléctricamente desde 600 mm hasta 900 mm. Altura entre la base del sillón y el asiento: 550 mm. Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie.
115.725	Sillón para reconocimiento y tratamiento Posición del asiento e inclinación del respaldo ajustables eléctricamente, altura regulable eléctricamente desde 600 mm hasta 900 mm. Altura entre la base del sillón y el asiento: 550 mm. Con memoria de hasta 8 posiciones. Activación de las funciones de ajuste mediante control manual o de pie.
115.755	Sillón para reconocimiento y tratamiento Posición del asiento e inclinación del respaldo ajustables eléctricamente, altura regulable eléctricamente desde 600 mm hasta 900 mm. Altura entre la base del sillón y el asiento: 550 mm. Con memoria de hasta 8 posiciones. Ajuste eléctrico placas apoya-pies (sin placas apoya-pies ref. 101.442 o perneras Göpel 101.455 a pedir por separado). Activación de las funciones de ajuste y de memoria mediante control manual o de pie.

Equipamiento de serie:



Apoyo lumbar apoyo lumbar para una mayor comodidad.



Bandeja de lavado de plástico, extraíble.



Bandeja para colocar el rollo de papel.



Asiento desmontable que facilita la limpieza y la sustitución del acolchado.



Soporte para control de mano de acero al cromo-níquel 18/10, para ser montado en el lateral derecho o izquierdo del sillón. (115.725 y 115.755)

Atención: Todos los modelos se suministran sin perneras. Rogamos elija una de las 4 opciones de la página 10. Ejecución móvil disponible (página 12)



Inclinación placa de asiento



Ajuste respaldo



Ajuste altura



Ajuste eléctrico placas apoya-pies (115.755)

Datos técnicos

Equipamiento de serie:

Asiento, respaldo y cabecero acolchados de forma ergonómica con apoyo lumbar, recipiente de lavado extraíble de plástico, bandeja para colocar rollos de papel hasta 500 mm del ancho, control de pie para ajuste de posiciones, placa base con 4 tornillos niveladores, piezas de plástico en color gris plateado, columna de elevación y bastidor del asiento y del respaldo barnizados según tabla de colores, tapizado según tabla de colores. Con cable de conexión de 3 metros de largo (también disponible sin cable de conexión para instalación fija).

Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz,

máximo 0,45 kW.

Carga de trabajo segura: 200 kgs.

Aviso importante:

El sillón se puede suministrar con 2 enchufes, según EN 60601-1.

Ver accesorios.

El barnizado de las piezas metálicas está hecho de polvo de resina, de altísima calidad, con superficies en brillo, resistentes a golpes y arañazos. Fácil limpieza, resistente a desinfectantes y cambios climatológicos. Colores estándar según tabla de colores.

Para otros colores según tabla RAL se aplicará un aumento de precio Ref. 100.051.

Tapizado:








Goma espuma montada sobre una placa de soporte, con una funda de cuero artificial de primera calidad.

Colores de la funda de cuero artificial ver tabla de colores (classic y comfort).

Datos importantes para confeccionar el pedido:

Color del tapizado: según tarjeta

Color de la columna y del bastidor del asiento y del respaldo (piezas metálicas): según tarjeta.

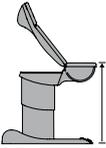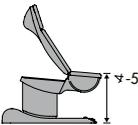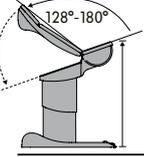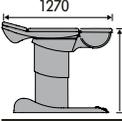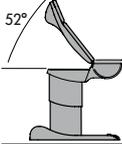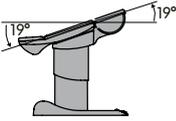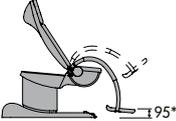Ajustes/Medidas	115.715	115.725	115.755
	600-900 mm*	600-900 mm*	600-900 mm*
	550 mm*	550 mm*	550 mm*
	850-1150 mm*	850-1150 mm*	850-1150 mm*
	600-900 mm*	600-900 mm*	600-900 mm*
	0 - 52°	0 - 52°	0 - 52°
	+ 19° - 19°	+ 19° - 19°	+ 19° - 19°
			
Placa base	En todos los modelos: 1050 x 575 mm		
Ancho acolchado	En todos los modelos: Respaldo 560 mm, Asiento 585 mm		
Inclinación eléctrica respaldo	■	■	■
Inclinación eléctrica asiento	■	■	■
Ajuste eléctrico altura	■	■	■
Tecla de memoria		■	■
Recipiente de lavado	■	■	■
Guías laterales en la parte del asiento	●	●	●
Ajuste eléctrico porta-pies			■
Peso neto, sin accesorios	155 kgs	155 kgs	164 kgs

■ = equipamiento de serie

● = opcional, con aumento de precio

* con la opción 101.230, la altura se incrementa + 75 mm

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Accesorios para todas las disciplinas

1

Placas apoya-pies (par) 101.442

con asidero integrado, giratorio, con tornillo de fijación. Revestimiento de cuero artificial en la parte central del asidero según tabla de colores, con fundas protectoras para las placas apoya-pies de plástico, transparentes.

2

Perneras Goepel (par) 101.455

con asidero integrado, revestimiento de cuero artificial en la parte central del asidero según tabla de colores. Perneras acolchadas en gris plateado, con correas de fijación. Barra de soporte de acero al cromo-níquel 18/10.

3

Perneras Goepel (unidad) 101.227

acolchados en gris plateado, con correa de fijación, soporte de acero al cromo-níquel 18/10, sin clamps de fijación (a pedir por separado: clamps de fijación 101.167 y rieles laterales 101.137)

3

Rieles laterales (par) 101.137

para montar en el lateral de la parte del asiento, de acero al cromo-níquel 18/10, medidas 25x10 mm, longitud 290 mm.

3

Clamp de fijación (unidad) 101.167

giratorio, de acero al cromo-níquel 18/10, para colocar en los rieles laterales.

3


Asidero (unidad) 101.158


en gris plateado, para montar en los rieles laterales 101.137 (solamente se utiliza en combinación con las perneras 101.227).

4

Perneras Ergo-Steps (par) 101.231

con bandejas de plástico, en color gris, ajustables, con asideros integrados, incluyendo clamps de fijación de acero al cromo-níquel 18/10 para montar en rieles laterales (ref. 101.137, a pedir por separado)

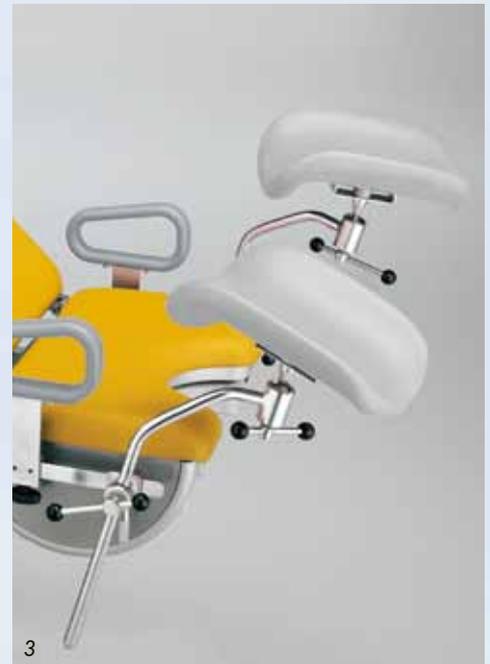

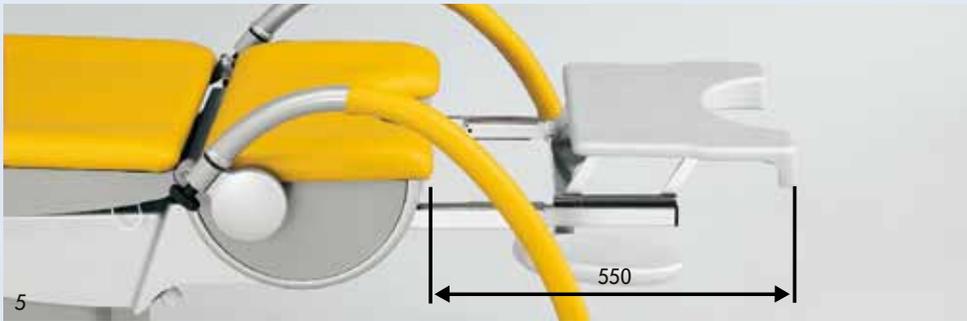

5
Placa de piernas 101.445
 telescópica, integrada en el bastidor del asiento,
 tapizado de goma espuma integral en color gris
 (340 x 470 x 20 mm).
 Carga de trabajo segura 50 kgs.
 (puede ser montado posteriormente)



6
Placa de piernas 101.447
 desmontable, acolchado de cuero artificial según
 tabla de colores (670 x 550 x 45 mm).
 Carga de trabajo segura 50 kgs.
 (puede ser montado posteriormente)



7
Tapizado intermedio 101.446
 desmontable, de goma espuma integral, gris,
 para la placa de piernas telescópica 101.445.
 (puede ser montado posteriormente)



8
Cojín 101.372
 funda de cuero artificial, según tabla de colores.



9
Funda protectora de plástico 101.481
 para el tapizado del asiento.

Accesorios para todas las disciplinas

1

Set de tratamiento con brazo articulado 101.653

giratorio e inclinable, para colocar instrumental, medicamentos, material desechable etc. Puede ser montado en el lateral derecho o izquierdo del sillón. Carga de trabajo segura: 5 kgs.

2

Placa con brazo soporte 101.654

giratorio e inclinable, para instrumental o aparatos, superficie 309 x 285 mm.

Carga de trabajo segura: 10 kgs.

3

Rollo de papel 100.176

ancho 400 mm.

4

2 Enchufes 101.490

para el modelo 115.715

según normativa EN 60601-1.

(no pueden ser montados posteriormente)

2 Enchufes 101.491

como modelo 101.490, pero tipo suizo

(no pueden ser montados posteriormente)

5

2 Enchufes 101.680

para los modelos 115.725 y 115.755

de acuerdo a la normativa EN 60601-1.

1 de ellos para ser activado desde el mando.

Un montaje posterior no es posible.

2 Enchufes 101.681

como modelo 101.680, pero tipo suizo

(no pueden ser montados posteriormente)

Enchufes para otras regiones sobre pedido!

6

Estribo apoya-pies 101.475

de acero al cromo-níquel, para el médico.

(no se puede utilizar en combinación con el recipiente de lavado giroscópico 101.494/101.499 y el recipiente para instrumental 101.204)

7

Peldaño 101.452

fijo, desplazable, plataforma de plástico.

(no se puede utilizar en combinación con la movilidad 101.230, el recipiente de lavado giroscópico 101.494/

101.499 y el recipiente para instrumental 101.204)

8

Fundas protectoras para los apoya-pies (par) 101.480

de plástico transparente.

9

Movilidad 101.230

4 ruedas dobles Ø 75 mm,

con freno y conductivas eléctricamente.

(instalación posterior posible, no puede usar con el recipiente de lavado 101.201)

Nota:

su utilización para el transporte de pacientes no es admitida!



Acesorios adicionales para la ginecología



Recipiente para instrumental 101.204

con motor eléctrico, de chapa de acero, con recubrimiento de polvo de resina en el color del sillón, montado en la columna, apertura y cierre del recipiente por motor eléctrico, tocando ligeramente la parte frontal, extracción total mediante rieles telescópicos, marco con contenedor extraíble de acero al cromo-níquel de 12 litros (para 5 litros de líquido), cesta de plástico con capacidad para aprox. 15 espéculos.

Bandeja adicional de acero al cromo-níquel. Carga de trabajo segura 8 kg.

Cable de conexión con enchufe, conexión: 90 - 240 V, 50/60 Hz, consumo máximo de potencia 20 W

Puede incorporarse con posterioridad (serie 115.7) a petición del cliente.

También puede emplearse junto con:

soporte para colposcopio 101.431 o **juego de tratamiento Schmitz con brazo soporte 101.653** o **bandeja con brazo soporte 101.654**

No es posible su empleo junto con:

estribo apoya-pies 101.475
peldaño 101.452
recipiente de lavado de acero al cromo-níquel 101.201/101.202



Tapadera 101.206

325 x 265 mm, de acero al cromo-níquel, para cubrir el contenedor de acero al cromo-níquel de 12 litros durante el transporte. (sin ill.)



Acesorios adicionales para la ginecología



1+2
Soporte de colposcopio 101.431
 para colposcopios marcas Leisegang, Leica, Kaps y Zeiss, puede ser montado en la derecha o en la izquierda. Para sistemas Kaps y Zeiss, la barra de conexión la tiene que suministrar el fabricante del colposcopio (sin colposcopio).



3
Recipiente de lavado bajo 101.205
 (aumento de precio)
 de acero al cromo-níquel 18/10,
 325 x 265 x 40 mm.



4
Recipiente de lavado profundo 101.201
 (aumento de precio)
 de acero al cromo-níquel 18/10,
 355 x 325 x 65 mm.

5
Calefacción de asiento 101.462
 funcionamiento desde el control de mano. Consumo medio aprox. 20 vatios, la temperatura deseada se puede ajustar (no se puede utilizar en combinación con el sillón para urología y para modelo 115.715).

Serie medi-matic® 115

Accesorios recomendados para ginecología



Referencia

115.715/115.725

- 1 x **101.372** Cojín
- 1 x **101.462** Calefacción de asiento (para 115.725)
- 1 x **101.490** 2 Enchufes (para 115.715)
- 1 x **101.680** 2 Enchufes (para 115.725)
- 1 x **101.204** Contenedor para instrumental

- Sistemas apoya-piernas, a elegir:
- 2 x **101.227** Perneras Goepel
 - 2 x **101.167** Clamp de fijación, giratorio
 - 1 x **101.137** Par rieles laterales
 - 2 x **101.158** Asideros

alternativamente:

- 1 x **101.442** Par placas apoya-pies

alternativamente:

- 1 x **101.455** Par perneras Goepel

alternativamente:

- 1 x **101.231** Par Ergo-Step
- 1 x **101.137** Par rieles laterales

115.755

- 1 x **101.372** Cojín
- 1 x **101.462** Calefacción de asiento
- 1 x **101.680** 2 Enchufes
- 1 x **101.204** Contenedor para instrumental

- Sistemas apoya-piernas, a elegir:
- 1 x **101.442** Par placas apoya-pies

alternativamente:

- 1 x **101.455** Par perneras Goepel

Accesorios adicionales para urología, urodinámica

1

Recipiente de lavado giroscópico 101.494

para modelos 115.725 y 115.755, de acero al cromo-níquel 18/10, recipiente grande y redonda, Ø 360 mm, extensible y orientable, con la posibilidad de retenerlo en cualquier posición, el filtro anti-olores se tiene que instalar de parte de la obra en la pared o en el suelo, entrada de agua mediante el control de pie o el control manual (115.725 y 115.755), desagüe mediante tubo flexible y tubuladura, Ø 40 mm. Según normas EN 1717.

¡Una instalación posterior no es posible!

Se suministra sin la cubeta estándar de plástico.

Funda protectora de plástico 101.481 está incluida en el volumen de entrega.

Recipiente de lavado giroscópico 101.499

para el modelo 115.715

sin embargo la entrada de agua se activa con el pie mediante un botón situado en el revestimiento base del sillón, por lo demás como modelo 101.494.

2

Colador 100.184

redondo, de acero al cromo-níquel, para el lavado giroscópico.

3

Soporte lateral 101.497

de acero al cromo-níquel, para el lavado giroscópico, montado a la izquierda o a la derecha.

4

Recipiente de lavado 101.202

(Aumento de precio)

de acero al cromo-níquel 18/10, ancho 350 mm, longitud 325 mm, fondo 65 mm, con desagüe, tapón y tubo $\frac{3}{4}$ " , longitud 1200 mm.


Se suministra sin la cubeta estándar de plástico.

Funda protectora de plástico 101.481 está incluida en el volumen de entrega.

Cubo de 12 litros 100.135

de acero al cromo-níquel 18/10, con orificio en la tapa para entrada de tubo.



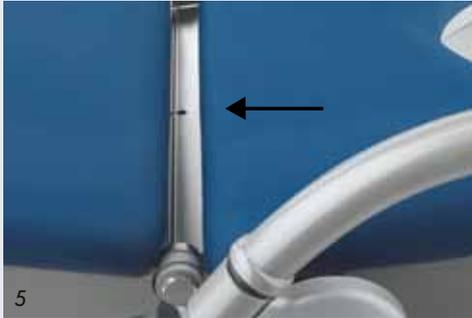

5
Canaleta recoge-líquidos 101.660
 de acero al cromo-níquel 18/10,
 montada en la parte trasera del asiento

6
Acolchado especial 101.495
 (Aumento de precio)
 para urodinámica, ancho 585 mm,
 longitud 350 mm. Se suministra en lugar del
 acolchado normal del asiento

Prolongación asiento 101.496
 de 2 piezas, para urodinámica.
 Medidas acolchado: ancho 220 mm, largo 150 mm
 (ref. 101.139 a pedir por separado)

7
Estribo de apoyo 101.498
 para el respaldo, en caso de colocarlo en posición
 de 80° de inclinación.

8
Guía lateral (par) 101.138
 de acero al cromo-níquel, 25 x 10 mm, para
 la colocación de accesorios, longitud 480 mm,
 montada en la parte del respaldo.
 ¡Una instalación posterior no es posible!

9
Riel lateral (par) 101.139
 de acero al cromo-níquel, 25 x 10 mm, longitud
 150 mm para el asiento, para usar 101.442 o
 101.455, para la aplicación de la prolongación
 del asiento.
 ¡Una instalación posterior no es posible!

10
Apoya-brazos 101.103
 acolchado con espuma integral, con conductividad
 eléctrica, con cinchas de agarre, con piezas de
 sujeción 101.166, regulable vertical- y horizontalmente,
 abatible con articulación esférica longitud 400 mm.
 Se necesita guía lateral 101.138!

11
Conector de equiparación de potencial 101.493

Serie medi-matic® 115

Accesorios recomendados para urología



Referencia

115.715/115.725

- 1 x **101.372** Cojín
- 1 x **101.490** 2 Enchufes (para 115.715)
- 1 x **101.680** 2 Enchufes (para 115.725)

Accesorios especiales, a elegir:

- 1 x **101.499** Recipiente de lavado giroscópico (para 115.715)
- 1 x **101.494** Recipiente de lavado giroscópico (para 115.725)
- 1 x **100.184** Cesto de recogida
- 1 x **101.660** Canaleta recoge-líquidos

alternativamente:

- 1 x **101.202** Recipiente de lavado con desagüe
- 1 x **100.135** Cubo de 12 litros
- 1 x **101.660** Canaleta recoge-líquidos

Sistemas apoya-piernas, a elegir:

- 2 x **101.227** Perneras Goepel
- 2 x **101.167** Clamp de fijación, giratorio
- 1 x **101.137** Par rieles laterales
- 2 x **101.158** Asideros

alternativamente:

- 1 x **101.442** Par placas apoya-pies

alternativamente:

- 1 x **101.455** Par perneras Goepel

115.755

- 1 x **101.372** Cojín
- 1 x **101.680** 2 Enchufes

Accesorios especiales, a elegir:

- 1 x **101.494** Recipiente de lavado giroscópico
- 1 x **100.184** Cesto de recogida
- 1 x **101.660** Canaleta recoge-líquidos

alternativamente:

- 1 x **101.202** Recipiente de lavado con desagüe
- 1 x **100.135** Cubo de 12 litros
- 1 x **101.660** Canaleta recoge-líquidos

Sistemas apoya-piernas, a elegir:

- 1 x **101.442** Par placas apoya-pies

alternativamente:

- 1 x **101.455** Par perneras Goepel



Recipiente de lavado 101.202 y cubo 100.135

Accesorios recomendados para urodinámica



Referencia

115.715/115.725

- 1 x **101.495** Acolchado especial
- 1 x **101.139** Par rieles laterales
- 1 x **101.496** Prolongación asiento
- 1 x **101.497** Soporte lateral*
- 1 x **101.498** Estribo de apoyo

Sistemas apoya-piernas, a elegir:

- 2 x **101.227** Perneras Goepel
- 2 x **101.167** Clamp de fijación, giratorio
- 1 x **101.137** Par rieles laterales
- 2 x **101.158** Asideros

alternativamente:

- 1 x **101.442** Par placas apoya-pies

alternativamente:

- 1 x **101.455** Par perneras Goepel

115.755

- 1 x **101.495** Acolchado especial
- 1 x **101.139** Par rieles laterales
- 1 x **101.496** Prolongación asiento
- 1 x **101.497** Soporte lateral*
- 1 x **101.498** Estribo de apoyo

Sistemas apoya-piernas, a elegir:

- 1 x **101.442** Par placas apoya-pies

alternativamente:

- 1 x **101.455** Par perneras Goepel

*Nota:

Soporte lateral para el posicionamiento de la bandeja de acero, a tener en cuenta al usar el lavado giroscópico 101.494 o 101.499.



Estribo de apoyo 101.498 para el respaldo, en caso de colocarlo en posición de 80° de inclinación



Prolongación asiento 101.496

arco, el sillón de reconocimiento para ginecología – diseño bonito y gran funcionalidad

CE

arco
Design Award

- Diseño bonito, tecnología moderna y una excelente relación precio/calidad
- La altura inicial baja facilita a la paciente el hecho de subirse al sillón
- Altura regulable eléctricamente hasta la posición de „shock”
- Sistema de soporte de piernas ergonómico, con reposa-brazos integrado, para posibilitar una posición cómoda y relajada de la paciente
- Colores del tapizado y del chasis a elegir (ver tabla de colores)
- Amplia gama de accesorios
- Superficies lisas para posibilitar una limpieza fácil del sillón
- Botonera para funciones de memoria se pueden memorizar hasta 3 posiciones distintas y hasta 8 posiciones para el modelo 114.700, las cuales se quedan grabadas también en caso de cortes de luz. (opcional)



Botonera p. funciones de memoria para 114.595 y 114.600

Sillón 114.700:
Chasis aluminio gris RAL 9007
Tapizado azul caribe 82
Piezas de plástico gris plateado

Design: Rainer Schindhelm



Cambio de altura eléctricamente, desde 575 mm hasta 1320 mm



Posición Shock

arco para ginecología CE

Descripción



Sillón para reconocimiento y tratamiento 114.500

Asiento regulable eléctricamente, ángulo fijo entre asiento y respaldo. Altura variable desde 575 mm hasta 1320 mm. Placas apoya-pies ajustables con la mano, con asideros integrados, incluye 1 juego de fundas protectores 101.480. Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie.

Sillón para reconocimiento y tratamiento 114.600

Como modelo 114.500, pero adicionalmente con memoria para hasta 3 posiciones y botonera para las posiciones memorizadas. A través del control de pie el sillón se puede colocar en 2 de las posiciones memorizadas.

Activación de las funciones de ajuste y de memoria mediante control manual o de pie.

Sillón para reconocimiento y tratamiento 114.495

Como modelo 114.500, pero sin placas apoya-pies, para equipar con otro sistema de porta-piernas de Schmitz.

Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie.



Sillón para reconocimiento y tratamiento 114.595

Como modelo 114.495, pero adicionalmente con memoria para hasta 3 posiciones y botonera para las posiciones memorizadas.

Activación de las funciones de ajuste y de memoria mediante control manual o de pie.

A través del control de pie el sillón se puede colocar en 2 de las posiciones memorizadas.



Sillón para reconocimiento y tratamiento 114.700

Con función de memoria, botonera adicional para memorizar 8 posiciones. **Asiento regulable eléctricamente y de las placas apoya-pies**, ángulo fijo entre asiento y respaldo (45°). Altura variable desde 575 mm hasta 1320 mm.

Activación de las funciones de ajuste y de memoria mediante control manual o de pie.

Placas apoya-pies ajustables con asideros integrados, incluye 1 juego de fundas protectores 101.480, con 2 enchufes integrados, según EN 60601-1 un de ellos comutable mediante el mando.

El concepto de mando para arco 114.700

- Display gráfico, iluminado, para todos los movimientos del sillón
- Chequeo electrónico
- 1 tecla adicional, programable libremente, p. ej. para control de fuente de luz fría o colposcopio con 2 enchufes integrados
- Grabado con indicación de la función de memoria (hasta 8 posiciones)
- Movimientos suaves
- Control de los movimientos desde el control manual o desde el control de pie



Equipamiento de serie:

Asiento, respaldo y cabecero acolchados de forma ergonómica, recipiente de lavado extraíble de plástico, bandeja para colocar rollos de papel hasta 400 mm del ancho, pedal de pie para ajuste de posiciones, placa base con 4 tornillos niveladores, piezas de plástico en color gris plateado, columna de elevación y bastidor del asiento y del respaldo barnizados según tabla de colores, tapizado según tabla de colores. Con cable de conexión de 3 metros de largo y enchufe.

Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz, máximo 0,3 kW.

Peso neto: aprox. 100 kgs (modelos 114.500 y 114.600)

Peso neto: aprox. 93 kgs (modelos 114.495 y 114.595)

Peso neto ca. 126 kgs (modelo no. 114.700)

Carga de trabajo segura: 180 kgs.

El barnizado de las piezas metálicas está hecho de polvo de resina, de altísima calidad, con superficies en brillo, resistentes a golpes y arañazos. Fácil limpieza, resistente a desinfectantes y cambios climatológicos. Colores estándar según tabla de colores.

Para otros colores según tabla RAL se aplicará un aumento de precio Ref. 100.051.

Tapizado:

Goma espuma montada sobre una placa de soporte, con una funda de cuero artificial de primera calidad. Colores de la funda de cuero artificial ver tabla de colores (classic y comfort).

Datos importantes para confeccionar el pedido:

Color del tapizado: según tarjeta
Color de la columna y del bastidor del asiento y del respaldo (piezas metálicas): según tarjeta.







Asiento en forma ergonómica para garantizar una posición relajada y cómoda de la paciente



Enchufes integrados solamente en el modelo 114.700.

Datos técnicos

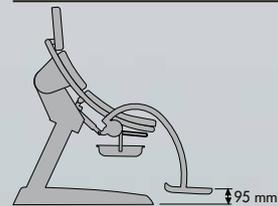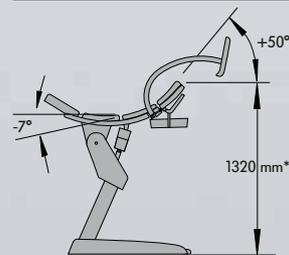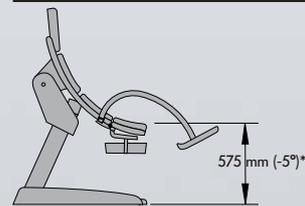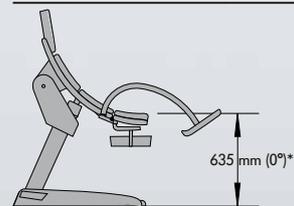

La distancia entre los porta-pies y el suelo es de 200 mm, si la placa de asiento está en nivel horizontal, y de 95 mm si la placa de asiento está inclinada hacia abajo.

Placa base 960 x 565 mm

Ancho del colchón 565 mm

* con la opción 101.030, la altura se incrementa + 75 mm.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



Inclinación placa de asiento
114.495 - 114.700



Ajuste eléctrico placas apoya-pies
114.700

arco Accesorios CE

1
Fundas protectoras de plástico 101.482
para el tapizado del asiento.

2
Rollo de papel 100.176
ancho 400 mm, integrado debajo del respaldo.

3
Estribo para el médico
(para apoyar los pies) 101.470

4
Movilidad 101.030
para los modelos 114.495, 114.500 y 114.700,
4 ruedas dobles Ø 75 mm, con freno y conductivas
eléctricamente.
(instalación posterior posible)

Nota:
¡No son aptos para el traslado de pacientes!

5
Soporte para colposcopio 101.421
para colposcopios marcas Leisegang, Leica, Kaps
y Zeiss, puede ser montado en la derecha o en
la izquierda.
Para sistemas Kaps y Zeiss, la barra de conexión
la tiene que suministrar el fabricante del colposcopio.
(sin colposcopio)
(no se puede utilizar en combinación con la
movilidad 101.030)

6
Recubrimiento de cuero artificial (par)
101.485
para asideros integrados, con cremallera,
según tarjeta.

Recubrimiento de cuero artificial (par)
101.486
para asideros (101.458) con cremallera,
según tarjeta
(sin ilustración)

7
Cojín para cabeza 101.375
con fijación tipo velcro, tapizado en skai
según de colores

8
Fundas protectoras (par) 101.480
de plástico transparente, para placas apoya-pies

Recipiente de lavado 101.385
(aumento de precio)
de acero al cromo-níquel 18/10,
350 x 325 x 65 mm
(sin ilustración)





8

114.495 con 101.458



114.495 con 101.136, 101.167, 101.227

Los modelos arco 114.495 – 114.600 se pueden equipar también con otros apoyapiernas de Schmitz:

8

Perneras Goepel con asidero integrado (par) 101.458

9

Perneras Ergo-Steps (par) 101.231
Con bandejas de plástico, en color gris, ajustables, con asideros integrados, incluyendo clamps de fijación para montar en rieles laterales (ref. 101.136, a pedir por separado).

10

Perneras Goepel (unidad) 101.227

Acolchados en gris plateado, con correa de fijación, soporte de acero al cromo-níquel 18/10, sin clamps de fijación (a pedir por separado: clamps de fijación 101.167 y rieles laterales 101.136).

Par rieles laterales (par) 101.136

Para montar en el lateral de la parte del asiento, de acero al cromo-níquel, medidas 25x10 mm, longitud 290 mm.

Clamp de fijación (unidad) 101.167

Giratorio, de acero al cromo-níquel, para colocar en los rieles laterales.

Asidero (unidad) 101.158

En gris plateado, para montar en los rieles laterales 101.136 (solamente se utiliza en combinación con las perneras 101.227).



9

114.495 con 101.231, 101.136

arco


Sillón de reconocimiento y tratamiento para proctología

CE

- Diseño elegante, tecnología moderna y una excelente relación precio/calidad
- Altura mínima muy baja para facilitar la subida de la paciente al sillón
- Asiento abatible eléctricamente
- Interruptor de seguridad que impide el movimiento del asiento, si el sillón no se encuentra a la altura adecuada
- Posiciones de Trendelenburg y del asiento ajustables eléctricamente
- Sistema de soporte de piernas ergonómico, con asideros integrados, para posibilitar una posición cómoda y relajada de la paciente
- Colores del tapizado y del chasis a elegir (ver tabla de colores)
- Amplia gama de accesorios
- Superficies lisas para fácil limpieza

El concepto de mando para arco 114.660

- Display gráfico, iluminado, para todos los movimientos del sillón
- Chequeo electrónico
- 1 tecla adicional, programable libremente, p. ej. para control de fuente de luz fría con 2 enchufes integrados
- Grabado con indicación de la función de memoria (hasta 8 posiciones)
- Movimientos suaves
- Control de los movimientos desde el control manual o desde el control de pie

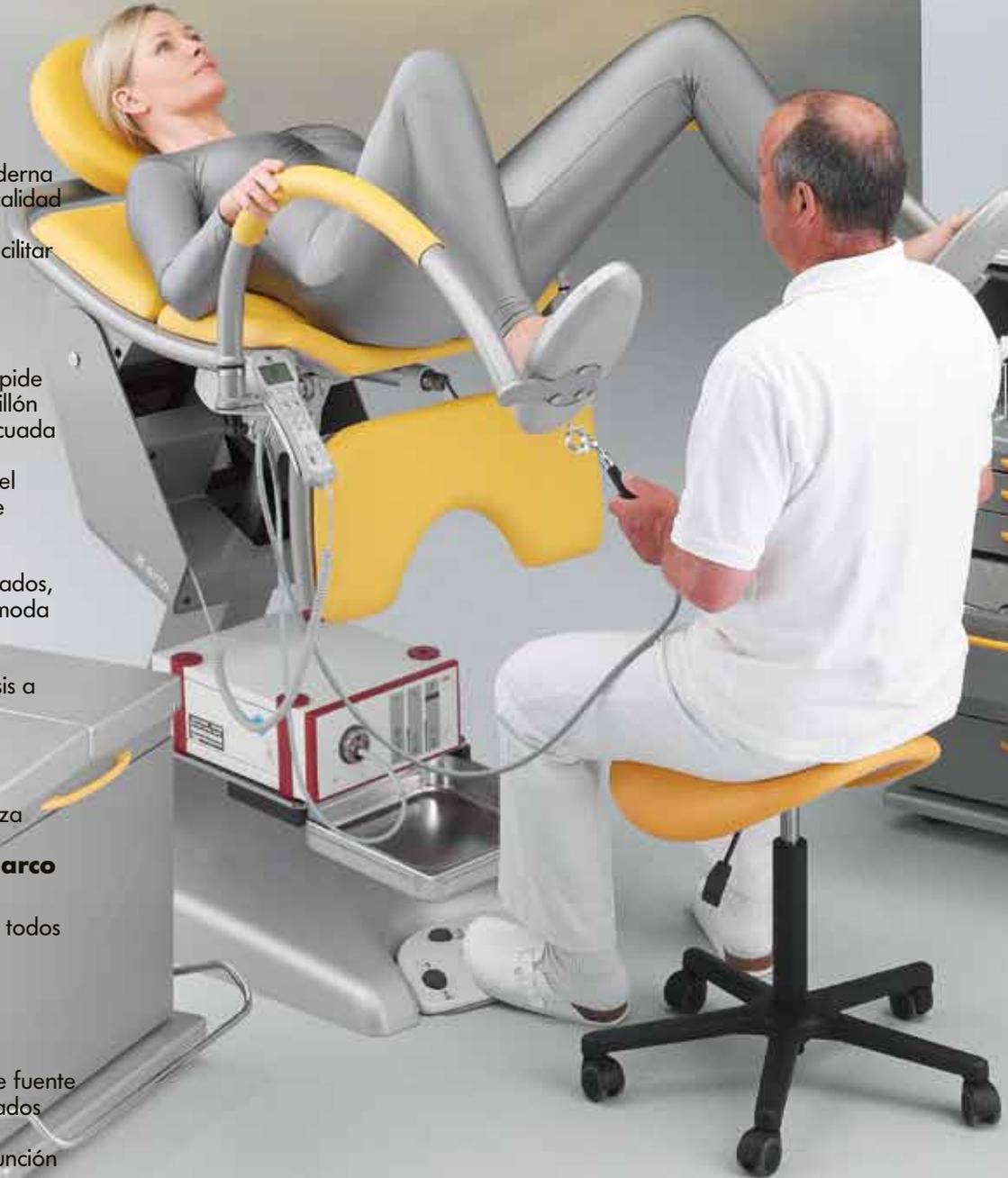

Colores en la foto:
Sillón:
Chassis aluminio gris RAL 9007
Tapizado dorado 86
Piezas de plástico gris plateado

Módulos:
Cuerpos aluminio gris RAL 9007
Frontales aluminio gris RAL 9007
Tiradores ambar RAL 1003

Funciones y sistemas apoyo-piernas



Altura mínima muy baja, para facilitar la subida al sillón



1



Cambio de altura eléctrico, hasta la posición de Trendelenburg



Posición de reconocimiento y tratamiento muy cómoda para el médico, con asiento abatible eléctricamente. Diferentes sistemas de apoya-piernas.

arco para la proctología CE



Posición de Trendelenburg ajustable eléctricamente y asiento abatible eléctricamente.



Sillón para reconocimiento y tratamiento 114.660

Posición de Trendelenburg ajustable eléctricamente, asiento abatible eléctricamente. Sin pneras. Ajuste de memoria para 8 posiciones. Activación de las funciones de ajuste y de memoria mediante control manual o de pie.

Equipamiento de serie:

Asiento, respaldo y cabecero acolchados de forma ergonómica, cubierta con recipiente de lavado integrado, extraíble, de acero al cromo-níquel, posicionamiento automático, bandeja para colocar rollos de papel, 2 enchufes integrados según normativa EN 60601-1 (1 de ellos puede ser activado desde el mando), pedal de pie para ajuste de posiciones, placa base con 4 tornillos niveladores, piezas de plástico en color gris plateado, columna de elevación y bastidor del asiento y del respaldo barnizados según tabla de colores, tapizado según tabla de colores. Con cable de conexión de 3 metros de largo y enchufe. Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz, 0,3 kW. Peso neto: aprox. 120 kgs. Carga de trabajo segura: 180 kgs

El barnizado de las piezas metálicas está hecho de polvo de resina, de altísima calidad, con superficies en brillo, resistentes a golpes y arañazos. Fácil limpieza, resistente a desinfectantes y cambios climatológicos. Colores estándar según tabla de colores.

Para otros colores según tabla RAL se aplicará un aumento de precio Ref. 100.051.

Tapizado:

Goma espuma montada sobre una placa de soporte, con una funda de cuero artificial de primera calidad. Colores de la funda de cuero artificial ver tabla de colores (classic y comfort).






Datos importantes para confeccionar el pedido:

Color del tapizado: según tabla de colores. Color de la columna y del bastidor del asiento y del respaldo (piezas metálicas): según tabla de colores.

Importante:

Interruptor de seguridad que impide el movimiento del asiento, si el sillón no se encuentra a la altura adecuada.

Datos técnicos

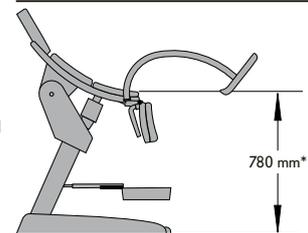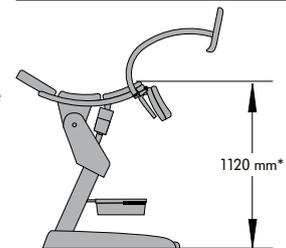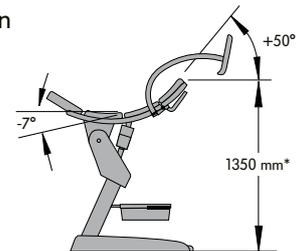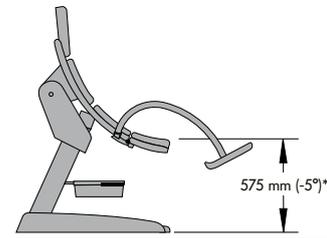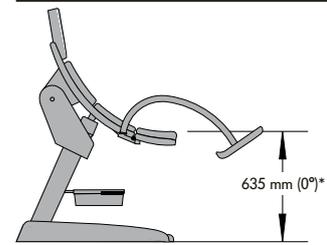

Placa base 960 x 565 mm

Ancho de colchón 565 mm

* con la opción 101.030, la altura se incrementa + 75 mm. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Accesorios



Enchufes integrados de serie

1 Placas apoya-pies (par) 101.456 con asidero integrado, barnizado según tabla de colores, giratorio, con tornillo de fijación. Fundas protectoras para las placas apoya-pies de plástico, transparentes.

2 Perneras Goepel (par) 101.458 con asidero integrado, barnizado según tabla de colores, acolchados en gris plateado, con correa de fijación, soporte de acero al cromo-níquel 18/10.

3 Perneras Ergo-Steps (par) 101.457 con bandejas de plástico, en color gris, ajustables, con asideros integrados, barnizados en el color del sillón.

4 Recubrimiento de cuero artificial (par) 101.485 para asideros de las ref. 101.456 y 101.457, con cremallera, según tabla de colores

5 Recubrimiento de cuero artificial (par) 101.486 para asideros de la ref. 101.458, con cremallera, según tabla de colores

6 Ejecución móvil 101.030 para el modelo 114.660, 4 ruedas dobles Ø 75 mm, con freno y conductivas eléctricamente. (instalación posterior posible)

Nota:
¡No son aptas para el traslado de pacientes!

7 Cojín para cabeza 101.375 con fijación tipo velcro, funda de cuero artificial, según tabla de colores.

8 Fundas protectoras (par) 101.480 de plástico transparente, para placas apoya-pies.

9 Cubierta con recipiente de lavado integrado y extraíble de acero al cromo-níquel 18/10 – de serie – cubierta con soporte, para colgar en la columna del sillón (y no atornillada), barnizado en el mismo color que el sillón. Para colocar una fuente de luz fría. Dimensiones de la bandeja 340 x 370 mm (l x f) carga de trabajo segura 15 kg. Recipiente de lavado 350 x 325 x 65 mm (l x f x p).

10 Rollo de papel 100.176 ancho 400 mm, para colocar debajo del respaldo.

conzentrum®

El sistema modular para la ginecología

El sistema modular conzentrum® se desarrolló a raíz de años de experiencia en este campo. Por ello, garantiza condiciones de trabajo óptimas y gran

confort de tratamiento en la consulta ginecológica. Acero de calidad cuidadosamente trabajado, recubrimiento de polvo de resina de primera calidad y muchos detalles prácticos garantizan una larga vida y gran funcionalidad.



Colores:
Mobiliario:
Encimera gris claro 70
Cuerpos y zócalos
blanco grisáceo RAL 9002
Frontales ambar RAL 1003
Tiradores blanco grisáceo RAL 9002
Sillón:
Tapizado dorado 86
Partes metálicas blanco grisáceo RAL 9002
Piezas de plástico gris plateado



411.630



411.625



Armarios de tratamiento para ginecología móvil, con todos los elementos funcionales necesarios: Cajones para instrumental, calentador para espéculos, compartimento para aparatos y enchufes.

Nota:
Para los diferentes modelos de los taburetes de exploración ver la página 15 en nuestro catálogo varimed nº 70.



1



5

1

Set Schmitz

Dispositivo para tratamiento, giratorio y regulable en altura, puede ser fijado en cualquier posición.

2

Tapa abatible con recipiente extraíble de acero al cromo-níquel, capacidad 15 litros.

3

Puerta basculante, en el interior superficies extraíbles.

4

Cajones desmontables con movimiento silencioso y fácil, extraíbles 4/5 partes.

5

Todos los zócalos están provistos de 4 patas niveladoras y tienen una superficie estructurada.

6

Armarios de tratamiento, móviles.

7

Pre calentamiento incorporado para espejuelos. Regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. 40°C.

8

Bandejitas prácticas para cajones, fáciles de limpiar.



2



6



3



7



4



8

conzentrum®

Descripción de modelos y materiales

Cuerpos de armarios

Planchas dobles de acero de gran calidad, realización autoportante. Gran estabilidad y excelente amortiguación del ruido. La parte exterior del armario está fabricada de una sola pieza de acero. Superficies lisas dentro y fuera. Todos los cuerpos de armario tienen alrededor una junta de PVC resistente a productos desinfectantes.

Puertas y frontales de cajones

Planchas dobles de acero, de gran calidad con amortiguación del ruido, con cantos redondeados.

Cajones

Cajones se deslizan sobre guías de precisión tipo QUADRO, completamente metálicas, según el principio de cuatro carriles. Excelente estabilidad, apertura muy fácil. Cajones con una apertura de 4/5, carga de trabajo segura 20 kg y de fácil cambio. Con tope de seguridad.

Medidas interiores de los cajones (largo x ancho x fondo):

Tipo A 415 x 60 x 315 mm
Tipo B 415 x 130 x 315 mm
Tipo C 415 x 190 x 315 mm
Tipo D 415 x 235 x 315 mm

En el primer cajón de arriba, la altura se reduce en 20 mm.

Tiradores

De forma ergonómica, con una distancia entre los agujeros de fijación de 192 mm. Superficie resistente a productos químicos y fácil de limpiar, gracias a su forma redondeada. Con recubrimiento de polvo, en colores según tarjeta (ver página 54).

Zócalos

Todos los zócalos están dotados de 4 patas niveladoras

Encimeras

Superficie estructurada de 30 mm de grosor, chapada de PVC, borde delantero redondeado, resistente a sustancias alcalinas rebajadas, indestructible con el uso normal. Longitud máxima 4100 mm. En color blanco perla 60 ó gris claro 70.

Piletas

de porcelano o de acero al cromo-níquel, a ras de superficie, pegadas con cola sin juntas visibles.

Lacado

Superficies con recubrimiento de polvo de resina de gran calidad, brillantes, con extrema resistencia a golpes y arañazos, de fácil limpieza, resistente a productos desinfectantes, a cambios climatológicos y a los rayos UVA.

Recubrimiento de serie de los cuerpos de los armarios alternativamente en color blanco grisáceo RAL 9002, blanco puro RAL 9010 o aluminio gris RAL 9007.

Puertas, frontales de los cajones y tiradores en color según tarjeta (ver página 54).

Los zócalos de los armarios bajos se fabrican en los siguientes colores:

Negro intenso	RAL 9005, estructurado
Blanco grisáceo	RAL 9002, estructurado
Blanco puro	RAL 9010, estructurado
Aluminio gris	RAL 9007, estructurado

Aumento de precio para colores especiales del chasis o del zócalo, según tabla de colores en página 54:
Chasis ref. 400.800 (Aumento de precio)
Zócalo ref. 400.801 (Aumento de precio)

Otros colores según tarjeta RAL sobre demanda.

Color estándar para encimeras: blanco perla 60 ó gris de claro 70.

Rogamos indiquen en sus pedidos los siguientes datos:

Color encimera (estándar: blanco perla 60 ó gris claro 70)



Color cuerpo de los armarios (estándar: RAL 9002, RAL 9010 ó RAL 9007), colores especiales según tarjeta con aumento de precio.

Frontales: color según tarjeta

Tiradores: Color según tarjeta ó cromado mate



Zócalos (estándar: RAL 9005, RAL 9010 ó RAL 9007): Color según tarjeta con aumento de precio.

conzentrum® Ejemplos para la planificación

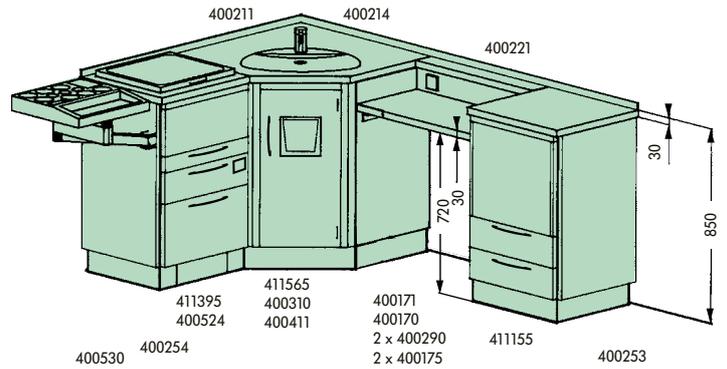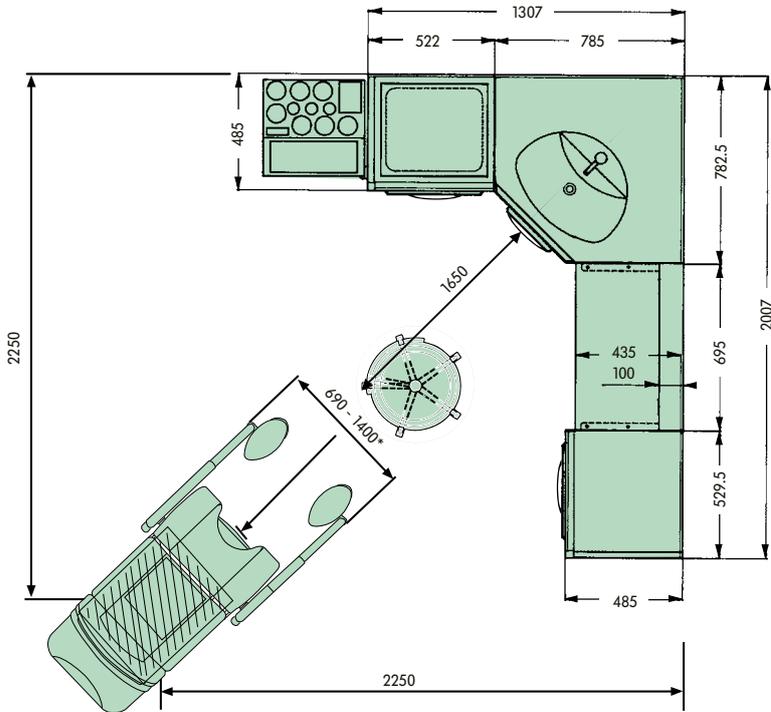


En el caso de instalaciones fijas, el cable tiene que encontrarse dentro del espacio (575 x 1050 mm) que ocupa la base del sillón (espacio rayado en el dibujo). Dentro de este espacio, el sillón se podrá desplazar.


*Dimensiones exteriores en posición de reconocimiento

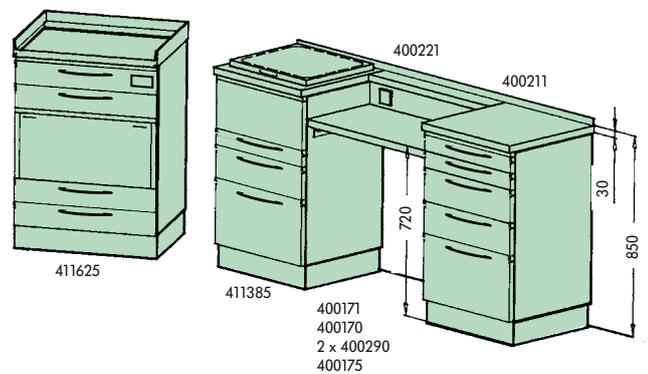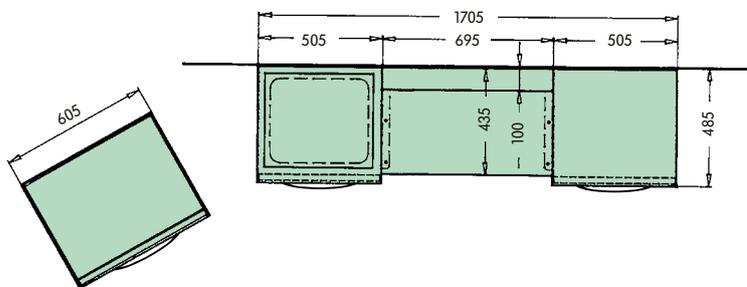


Consejos para la planificación; escala 1:25

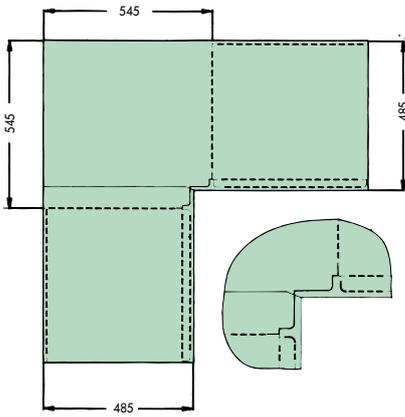

Esquina, ángulo 90 grados

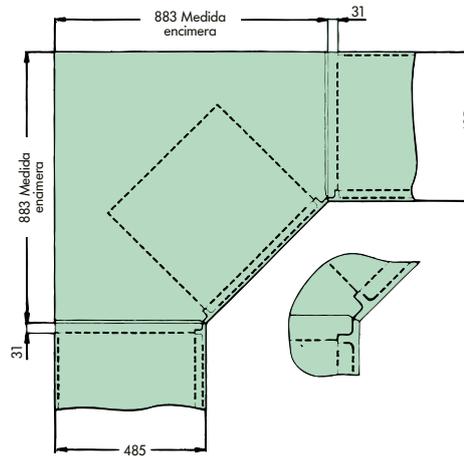


Esquina, ángulo 135 grado

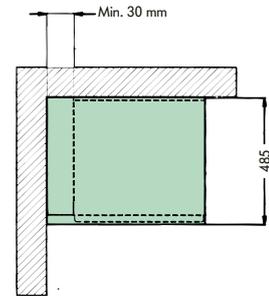


Mobiliario adosado a la pared.


En el caso de armarios con cajones hay que tener en cuenta un margen lateral mínimo de 30 mm, el cual se puede tapar con un panel de este mismo tamaño.

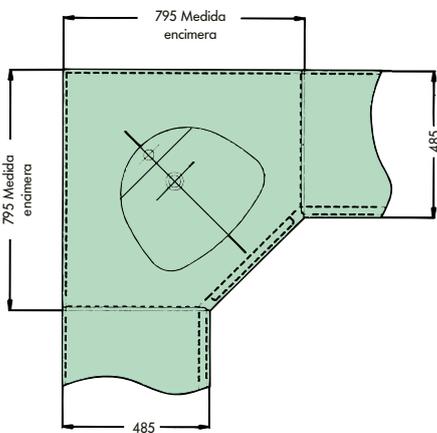

Esquina, con pila de lavar empotrada

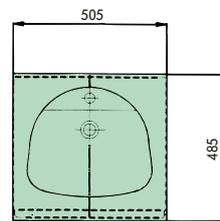

Pila de lavar empotrada

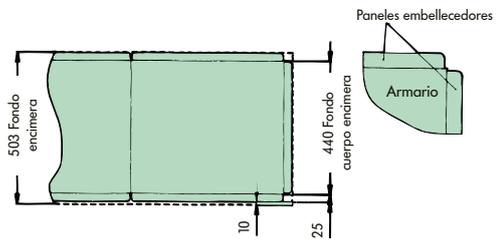

Armarios con paneles embellecedores

conzentrum®


Armarios para tratamiento

Armarios para aparatos

Armarios para almacenamiento

Armarios combinados

Altura 850 mm (incluido zócalo de 100 mm y encimera de 30 mm), ancho 500 mm, fondo 465 mm. Fondo encimera: 485 mm. El precio no incluye la encimera.

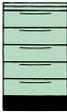Referencia	Descripción	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
 411.025	Armario de tratamiento con 4 cajones tipo A y 3 cajones tipo B	 411.035	Armario de tratamiento con 2 cajones tipo A y 4 cajones tipo B	 411.055	Armario para tratamiento con 2 cajones tipo A, 2 cajones tipo B y 1 cajón tipo D
 411.115	Armario para tratamiento y para aparatos con puerta basculante con 3 baldas extraíbles y 2 enchufes, 2 cajones tipo B	 411.155	Armario para aparatos con puerta basculante, compartimento con 2 baldas extraíbles y 2 enchufes, 2 cajones tipo B		
 411.215	Armario de tratamiento con juego de tratamiento Schmitz* con 1 puerta basculante, detrás 1 juego de tratamiento Schmitz, 1 cajón tipo B	 400.530	Juego de tratamiento Schmitz* giratorio y ajustable en altura, fijable en cualquier posición, montado en el lateral izquierdo de un armario. Juego de tratamiento universal para depositar instrumentos, medicamentos, material de uso único, etc. Para todas las especialidades.	 400.531	Juego de tratamiento SCHMITZ* como modelo 400.530, pero montado en el lateral derecho de armarios. Este modelo solo se puede utilizar en combinación con armarios de la serie conzentrum. *Composición: 1 porta-instrumentos de acero al cromo níquel 3 recipientes de cristal con tapa 3 botellas de cristal 1 recipiente bajo de acero al cromo níquel 3 recipientes altos de acero al cromo níquel, 1 porta-objetos Por razones de estabilidad, los juegos de tratamiento 400.530 y 400.531 no se pueden montar en armarios con ruedas.
 411.275	Armario para almacenamiento con 5 cajones tipo B	 411.285	Armario para almacenamiento con 3 cajones tipo B y 1 cajón tipo D		
 411.315	Armario para almacenamiento con 1 puerta fijada a la derecha y 3 baldas de plástico	 411.325	Armario para almacenamiento con 1 puerta fijada a la izquierda y 3 baldas de plástico		
 411.355	Armario combinado con 2 cajones tipo A, 2 cajones tipo B, 1 cajón con soporte para recolector de basura	 411.385	Armario combinado con 1 recipiente empotrado en la superficie de acero al cromo-níquel, capacidad 15 litros, extraíble, para instrumental utilizado, con tapa abatible. 1 Cajón tipo A, 1 cajón tipo B y 1 cajón tipo D	 411.395	Armario combinado superficie con recipiente empotrado de acero al cromo-níquel de 15 litros de capacidad, extraíble, para instrumental utilizado, con tapa abatible. 1 cajón tipo A, 1 cajón tipo B, 1 cajón con soporte para recolector de basura.

Referencia Descripción Referencia Descripción

Armarios para pilas de lavar

Altura 850 mm (incluido zócalo de 100 mm y encimera de 30 mm), ancho 500 mm, fondo 465 mm, fondo encimera 485 mm, sin encimera.

411.465



Armario para pila de lavar

para pila pequeña de porcelana o pila de acero al cromo-níquel, sin grifería, con compartimento para recolector de basura.

411.485



Armario para pila de lavar para pila pequeña de porcelana o pila de acero al cromo-níquel, sin grifería, puerta fijada en el lado derecho, con apertura y soporte para recolector de basura.


411.505

como modelo 411.485, pero puerta fijada en el lado izquierdo

Armarios para esquinas, armarios para pilas de lavar

Altura 850 mm (incluido zócalo de 100 mm y encimera de 30 mm), laterales 770 x 770 mm, fondo lateral encimera 780 x 780 mm, sin encimera.


411.555

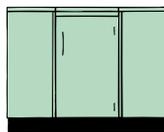

Armario para esquinas

Puerta fijada a la derecha, con 1 balda de plástico

411.565

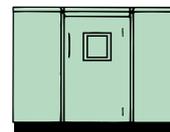

Armario de esquina para pila de lavar

para pila de lavar grande de porcelana o pila de acero al cromo-níquel, puerta fijada a la derecha, con recolector de basura, sin grifería

411.545

como modelo 411.555, pero puerta fijada a la izquierda

411.585

como modelo 411.565, pero puerta fijada a la izquierda

Armarios para tratamiento ginecológico

Altura 850 mm (incluido zócalo de 100 mm y encimera de 30 mm), ancho 600 mm, fondo 465 mm, fondo encimera 485 mm.

El precio no incluye la encimera.

Medidas interiores de los cajones para los armarios 411.615 hasta 411.625:

515 x 95 x 315 mm (largo x ancho x fondo)

515 x 170 x 315 (balda extraíble)

En el primer cajón de arriba, la altura se reduce en 20 mm.

Nota:

El segundo cajón con calentador de instrumentos (p. ej. espéculos) 400.525, disponible sobre demanda. Por favor ver página 38.

411.615



Armario para tratamiento ginecológico

CE/93/42/CE con 2 cajones en la parte de arriba, 1 de ellos con precalentador, potencia conectada: 230 V, potencia absorbida media: 20 W, conexión eléctrica en la parte trasera, cable de conexión con enchufa, 2 metros de largo, regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. 40° C, para instrumentos (p. ej. espéculos) 1 compartimento con puerta basculante para aparatos, 1 balda y 2 enchufes. En la parte de abajo 2 cajones.

411.630



Armario para tratamiento ginecológico CE/93/42/CEE móvil, 4 ruedas multidireccionales Ø 50 mm, antiestáticas, altura 1010 mm, incluido zócalo 100 nn, ancho 600 mm, fondo 485 mm, con modulo superior y encimera de plástico gris plateado, juego de tratamiento para depositar instrumentos, medicamentos, material de uso único etc. en la parte de arriba: 1 cajón tipo 6A, 1 cajón 100 mm di altura con precalentador, potencia conectada 230 V, potencia absorbida media: 20 W, la conexión eléctrica se efectúa en la parte trasera. Con cable de conexión con enchufa, 2 m de largo. Regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. 40° C, para instrumentos (po ej. espéculos) en la parte de abajo: 1 cajón tipo 6A, 3 cajones 100 mm de altura y 1 cajón tipo 6B.

Medidas interiores de los cajones (largo x ancho x fondo):

Tipo 6A 515 x 60 x 315 mm

Tipo 6B 515 x 130 x 315 mm

frontale de 100 mm de alt. 515 x 95 x 315 mm

En el primer cajón de arriba, la altura se reduce en 20 mm.

411.625




Armario para tratamiento ginecológico

CE/93/42/CEE como modelo 411.615, pero con 4 ruedas antiestáticas Ø 50 mm, superficie superior en color blanca de plástico con borde de 3 lados inclusive.

conzentrum® Accesorios


Referencia Descripción

400.015 Bandeja
para cajones tipo A,
de materia plástica, gris

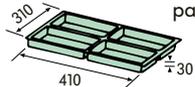


Referencia Descripción

400.016 Bandeja
para cajones tipo A,
de materia plástica, gris

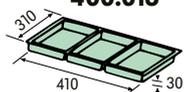


Referencia Descripción


400.017 Bandeja
para cajones tipo A,
de materia plástica, gris

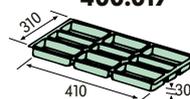

400.050 Bandeja
para cajones tipo B,
de materia plástica, gris

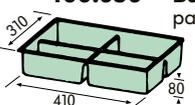

400.060 Bandeja
para cajones tipo B,
de materia plástica, gris

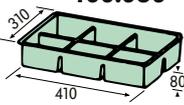

400.492 Balda adicional
de plástico,
para armarios de 500 mm
de ancho

400.524 Precalentador ***
CE / 94/42/CEE
regulación y control de temperatura
mediante display, graduable hasta
al máx. 20° C, para instrumentos
(por ej. espéculos) para cajones tipo B
de los armarios de 500 mm de ancho
potencia conectada: 230 V,
potencia absorbida media: 40 W,
la conexión eléctrica se efectúa en la
parte trasera. Con cable de conexión
con enchufe, 2 m de largo.
**Es posible instalar más de
uno precalentador en un
armario, sobre pedido.**

400.525 Precalentador ***
CE / 94/42/CEE
regulación y control de temperatura
mediante display, graduable hasta
al máx. 20° C, para instrumentos
(por ej. espéculos) para el segundo
cajón de arriba de los modelos
411.615/411.625 potencia conectada:
230 V, potencia absorbida media: 40 W,
la conexión eléctrica se efectúa en la
parte trasera. Con cable de conexión
con enchufe, 2 m de largo.
**Es posible instalar más de
uno precalentador en un
armario, sobre pedido.**


*** Rogamos tener en cuenta que el
precalentador no se puede colocar
en los cajones superiores si este
fuera del tamaño A no en las baldas
extraíbles de los armarios modelos
411.115 y 411.155
Nota:
Tratándose de un producto para
uso médico, los calentadores
solamente se pueden utilizar en
combinación con los armarios del
mobiliario concentrum, con cajones.
Rogamos tener en cuenta las
normativas locales para su conexión
y el funcionamiento.

400.211 Encimera
superficie plastificada de 30 mm
de grosor, borde delantero
redondeado, hasta 600 mm
de fondo, precio por metro
lineal


400.212 Encimera
superficie plastificada de
30 mm de grosor, borde
delantero redondeado,
hasta 900 mm de fondo,
precio por metro lineal

400.213 Encimera
superficie plastificada de
30 mm de grosor,
borde delantero redondeado,
hasta 1200 mm de fondo,
precio por metro lineal

400.214 Encimera
para armario para esquinas,
profundidad hasta 600 mm

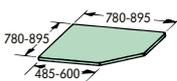

400.215 Encimera
para armario para esquinas,
profundidad hasta 900 mm

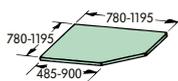

400.221 Regleta
para sellar los armarios con
la pared, color blanco,
precio por metro



400.310 Monomando
cromado, para presión alta







400.311 Monomando
cromado, para presión baja

400.372 Control electromagnético
CE / 89/336/CEE
para entrada de agua,
presión alta

400.373 Control electromagnético
CE / 89/336/CEE
para entrada de agua,
presión baja

400.330 Dispensador de jabón
completo

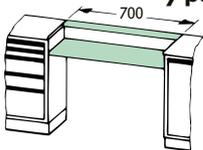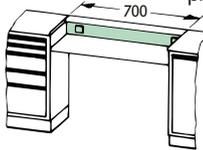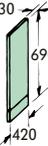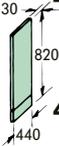

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
400.170	Tablero para escribir y para microscopio Superficie descolgada sin panel embellecedor en la parte delantera, precio por cada 10 cms. empezados	400.171	Panel embellecedor plancha de acero, con recubrimiento de polvo de resina, precio por cada 10 cms. empezados	400.175	Enchufe, color blanco para montar en el panel trasero del tablero 400.170, sin cableado
					
400.290	Angulo de soporte para encimeras más largas y tablero para microscopio	400.295	Angulo de soporte para la fijación de encimeras en la pared	400.300	Bastidor de soporte para colocar y fijar encimeras más largas
					
400.716	Bastidor de soporte para estabilizar encimeras colocadas sin armarios, precio por cada 10 cms	400.248	Panel lateral derecho, fondo 420 mm, para colocación del tablero de escribir 400.170	400.251	Panel lateral derecho, fondo 440 mm, como soporte para encimeras más largas de armarios de 850 mm de altura
					
		400.249	Panel lateral izquierdo	400.252	Panel lateral izquierdo
400.253	Panel embellecedor lateral para el lado derecho, medidas 440 x 720 x 22 mm	400.260	Panel embellecedor lateral con zócalo en la parte derecha trasera, hasta 350 mm	400.271	Panel embellecedor frontal con zócalo, hasta 350 mm
400.254	Panel embellecedor lateral para el lado izquierdo, medidas 440 x 720 x 22 mm	400.265	Panel embellecedor lateral con zócalo en la parte izquierda trasera, hasta 350 mm	400.281	Panel embellecedor trasero con zócalo, a partir de 350 mm, precio por cada 10 cms. empezados
400.285	Panel embellecedor para esquinas, ángulo 135°, con zócalo, medidas 35 x 35 mm	400.288	Panel embellecedor trasero para armarios con pila de lavar modelos 411.565 - 411.595	400.121	Dispositivo de movilidad para armarios de 500 mm de ancho, con 1 asidero, altura del armario 850 mm no es posible con refs.: 411.355 y 411.395
400.286	Panel embellecedor para esquinas, ángulo 135°, con zócalo, medidas 70 x 70 mm				
400.401	Pila de lavar de porcelana, con válvula de sobreflujo y agujero de perforación para grifería, empotrada en la encimera, sin encimera	400.411	Pila de lavar de porcelana, modelo grande, con válvula de sobreflujo y agujero de perforación para grifería, empotrada en la encimera, sin encimera	400.421	Pila de lavar de acero al cromo-níquel, con válvula de sobreflujo, empotrada en la encimera, sin encimera
					

Prepárese para un concepto innovativo: Sistema modular Orbit





Orbit

Mobiliario modular para ginecología y proctología



Con el mobiliario Orbit, desarrollado en colaboración estrecha con ginecólogos y teniendo en cuenta sobre todo factores como funcionalidad, flexibilidad y rentabilidad, Ud. tendrá todo bajo control.

El sistema Orbit consiste de 17 módulos, móviles e independientes, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

La inversión inicial es mínima, teniendo en cuenta que se puede empezar a trabajar con un sólo módulo para guardar el instrumental.

Para la retirada de instrumental o material desechable utilizado, dispone de un módulo especialmente preparado para este fin.

En cualquier momento, se pueden hacer ampliaciones y/o modificaciones en la colocación de los módulos. Sin mayores problemas, estos módulos también se pueden incorporar en otro mobiliario existente en las instalaciones.

Los materiales e instrumentos se pueden guardar de una forma ordenada, para tenerlos siempre a disposición. Gracias a sus ruedas, todos los módulos se pueden cambiar de sitio fácilmente.

El sistema modular Orbit está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con un recubrimiento en la superficie que permite una limpieza fácil y gran resistencia contra desinfectantes, cambios climáticos y golpes o arañazos.



2

Colores en la foto:
Módulos:
Cuerpos aluminio gris
RAL 9007
Frontales aluminio gris
RAL 9007

Tiradores:
pardo cobre RAL 8004
Sillón ginecología:
Tapizado gris plateado 55
Partes metálicas pardo cobre RAL 8004
Piezas de plástico gris plateado

Orbit

Mobiliario modular para ginecología y proctología

Colores en la foto:

Módulos:

Cuerpos y frontales

amarillo colza RAL 1009050

Tiradores gris antracita RAL 7016

Sillón ginecología arco:

Tapizado gris titanio 91

Partes metálicas

amarillo colza RAL 1009050

Piezas de plástico gris plateado

Taburete de exploración 222.155

Tapizado gris titanio 91





2



1



2

1

El módulo de retirada dispone de un recipiente con una capacidad de 20 litros para instrumental utilizado, con su cesta. En el lado opuesto hay un segundo recipiente con una capacidad de 10 litros para material desechable. Una palanca en la parte frontal permite su fácil apertura con el pie.

2

El módulo para guardar el instrumental dispone de una tapadera que protege al material colocado en la superficie contra el polvo. Por otro lado, el cajón para guardar el instrumental lleva incorporado un precalentamiento para los espéculos.

Regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. 40°C.

3

Los módulos de almacenamiento disponen de una superficie de plástico, con rebordes laterales.

4

El módulo grande para basura dispone de una tapadera oscilante que se cierra sola.

5

Todos los módulos están equipados con cuatro ruedas antiestáticas Ø 50 mm y una protección contra golpes de plástico.

6

Los cajones se pueden sacar fácilmente, sin ayuda de otra persona. Van colocados sobre rieles de precisión metálicas, de movimientos suaves, y tienen una gran estabilidad lateral y vertical. Los tiradores ergonómicos de los cajones y las partes frontales de los cajones se pueden suministrar en cualquier de los colores de la gama Schmitz, sin aumento de precio. Los frontales de los cajones son de doble chapa, con cantos redondeados.

7

Los tiradores ergonómicos de los cajones y las partes frontales de los cajones se pueden suministrar en cualquier de los colores de la gama Schmitz, sin aumento de precio. Los frontales de los cajones son de doble chapa, con cantos redondeados.

8

El puesto para el microscopio permite, gracias a su superficie ergonómicamente desarrollada, un trabajo agradable. La superficie es de fácil limpieza y lleva incorporada un pequeño recipiente para material contaminado.



3



4



5



6



7



8

Combinación de muebles de instalación fija y móviles (sistemas conzentrum® y Orbit) para ginecología y proctología



2

Colores en la foto:
Módulos –
Cuerpos, frontales y zócalos:
verde abeto RAL 1703020
Tiradores: cromado mate
Encimera: gris claro 70 ò gris plateado
Sillón ginecología:
Tapizado: verde musgo 81
Partes metálicas: aluminio gris RAL 9007
Piezas de plástico: gris plateado


Orbit

Módulos para guardar instrumental, medicamentos y material

Módulos para retirada

Módulos para almacenamiento

Encimeras

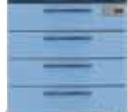Referencia	Descripción
420.200	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Encimera de plástico, con tapadera y juego de tratamiento, 1 cajón tipo 6A, 1 cajón tipo 6B con calentador de instrumentos*, potencia conectada 230 V, potencia absorbida media 20 W, cable de conexión con enchufe, 2 m de largo, (p. ej. espéculos) regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. de 40° C, y 1 cajón tipo 6C, medida 660 x 785 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.201	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Encimera de plástico, con tapadera y juego de tratamiento, 1 cajón tipo 6A, 2 cajones tipo 6B, uno de ellas con calentador de instrumentos*, potencia conectada 230 V, potencia absorbida media 20 W, cable de conexión con enchufe, 2 m de largo, (p. ej. espéculos) regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. de 40° C, y 1 cajón tipo 6C, medida 660 x 920 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.205	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Encimera de plástico, con tapadera y juego de tratamiento, 3 cajones tipo 6B, uno de ellos con calentador de instrumentos*, potencia conectada 230 V, potencia absorbida media 20 W, cable de conexión con enchufe, 2 m de largo, (p. ej. espéculos) regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. de 40° C, medida 660 x 785 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.206	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Encimera de plástico, con tapadera y juego de tratamiento, 4 cajones tipo 6B, uno de ellos con calentador de instrumentos*, potencia conectada 230 V, potencia absorbida media 20 W, cable de conexión con enchufe, 2 m de largo, (p. ej. espéculos) regulación y control de temperatura mediante display, graduable hasta al máx. de 40° C, medida 660 x 920 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.210	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.200, pero sin tapadera, medida 660 x 665 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.220	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.200, pero sin tapadera y sin juego de tratamiento, encimera plástica con reborde en 3 lados, medida 660 x 545 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.211	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.201, pero sin tapadera, medida 660 x 800 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.221	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.201, pero sin tapadera y sin juego de tratamiento, encimera plástica con reborde en 3 lados, medida 660 x 680 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.215	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.205, pero sin tapadera, medida 660 x 665 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.225	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.205, pero sin tapadera y sin juego de tratamiento, encimera plástica con reborde en 3 lados, medida 660 x 545 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.216	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.206, pero sin tapadera, medida 660 x 800 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.226	 <p>Módulo para guardar instrumental, medicamentos y material € 93/42/CEE Como 420.206, pero sin tapadera y sin juego de tratamiento, encimera plástica con reborde en 3 lados, medida 660 x 680 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>

* Calentador de instrumentos adicional para cajón tipo 6B sobre demanda (Ref. 400.526) (no disponible para el modelo 420.200, 420.205, 420.210, 420.215, 420.220, 420.225)

Referencia	Descripción
420.240	<p>Módulo para retirada Con 1 recipiente de 20 litros (medidas interiores: 285 x 205 x 345 mm, largo x alto x fondo), con cesta para guardar instrumental utilizado y 1 cubo de basura de 10 litros (medidas interiores: 205 x 135 x 360 mm, largo x alto x fondo). La tapa se abre por medio de un pedal, medida 565 x 560 x 560 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.242	<p>Módulo para retirada Cubo de basura de 20 litros de capacidad (medidas interiores: 285 x 205 x 345 mm, largo x alto x fondo), extraíble, con cesta para guardar instrumental utilizado. Medida 400 x 500 x 320 mm (largo x alto x fondo). Lacado según tarjeta, sin aumento de precio.</p>
420.250	<p>Módulo para retirada Cubo de basura de 60 litros de capacidad, medida 375 x 810 x 295 mm (largo x alto x fondo), en color gris. Lacado según tarjeta, sin aumento de precio.</p>
420.260	<p>Módulo para almacenamiento Con 4 cajones tipo 5B, medida 560 x 680 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.265	<p>Módulo para almacenamiento Con 2 cajones tipo 5A, 1 cajón tipo 5B y 1 cajón tipo 5D, medida 560 x 680 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.270	<p>Módulo para almacenamiento Con 2 cajones tipo 5B y 1 cajón tipo 5D, medida 560 x 680 x 525 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.280	<p>Encimera para microscopio Material de plástico, con 4 patas Ø 60 mm, recipiente para desechos integrado, con 2 enchufes, medida 800 x 850 x 550 mm (largo x alto x fondo)</p>
420.290	<p>Encimera Encimera de 30 mm de grosor, con 4 patas Ø 60 mm, color gris claro o blanco perla, medida 800 x 850 x 550 mm (largo x alto x fondo), para colocar debajo 1 armario para almacenamiento.</p>
420.295	<p>Encimera Encimera de 30 mm de grosor, con 4 patas Ø 60 mm, color gris claro o blanco perla, medida 1500 x 850 x 550 mm (largo x alto x fondo), para colocar debajo 2 armarios para almacenamiento. Encimeras con otras medidas sobre demanda.</p>

Orbit

Descripción de modelos y materiales

Cuerpos de los armarios

Planchas de acero de alta calidad, realización autoportante. Gran estabilidad y excelente amortiguación del ruido. La parte exterior del armario está fabricada de una sola pieza de acero. Superficies lisas en la parte exterior. Todos los cuerpos llevan una junta de PVC resistente a productos desinfectantes.

Frontales de los cajones

Planchas dobles de acero de alta calidad, con amortiguación del ruido, cantos redondeados.

Cajones

Los cajones se deslizan sobre guías de precisión tipo QUADRO, completamente metálicas, según el principio de 4 carriles. Excelente estabilidad a nivel lateral y de altura, con apertura muy fácil. Los cajones tienen una apertura de 4/5 partes y se pueden cambiar fácilmente sin herramientas. Con tope de seguridad.

Medidas interiores de los cajones (largo x ancho x fondo):

Tipo 5A	415 x 60 x 315 mm
Tipo 5B	415 x 130 x 315 mm
Tipo 5D	415 x 235 x 315 mm
Tipo 6A	515 x 60 x 315 mm
Tipo 6B	515 x 130 x 315 mm
Tipo 6C	515 x 190 x 315 mm

En el primer cajón de arriba, la altura se reduce en 20 mm.

Asideros

De forma ergonómica, distancia entre los agujeros de fijación 192 mm. Superficie lisa resistente a productos químicos, de fácil limpieza. Disponible con recubrimiento en colores según tarjeta.

Ruedas

Los armarios están provistos de 4 ruedas dobles antiestáticas, Ø 50 mm.

Superficies

Los carros disponen de una superficie de plástico antiestático, sin ranuras, de color gris plateado, resistente a desinfectantes y a arañazos. La parte inferior de estas superficies está sellada para evitar la penetración de líquidos.

En la parte superior llevan un reborde en 3 lados. Fácil limpieza.

Encimeras para mesas de trabajo

Superficie estructurada de 30 mm de grosor, chapada de PVC, encolada según normas DIN 68763 E1. En la parte inferior lleva un recubrimiento especial de resina. Canto redondeado en la parte delantera. Resistente a sustancias alcalinas rebajadas. Colores disponibles: Blanco perla 60 ó gris claro 70.

Lacado

Recubrimiento de polvo de resina de alta calidad, en brillo, de fácil limpieza y muy resistente a golpes, arañazos, rayos UVA y cambios climatológicos.

Colores estándar para chasis de los armarios y bastidores de las encimeras: Blanco grisáceo RAL 9002, Blanco puro RAL 9010 ó Aluminio gris RAL 9007

Otros colores para chasis de los armarios y bastidores de las encimeras según tarjeta (ver página 54): Ref. 400.800 (Aumento de precio)

Frontales de los cajones y tiradores en color según tarjeta (ver página 54)

Otros colores según tarjeta RAL sobre demanda.

Rogamos indiquen en sus pedidos los siguientes datos:

Superficie de los armarios: gris plateado





Encimeras: a elegir entre blanco perla 60 y gris claro 70

Chasis de los armarios y bastidores para las encimeras: a elegir entre los colores estándar RAL 9002, RAL 9010 y RAL 9007 o según tarjeta, con aumento de precio.

Frontales de los cajones: Según tarjeta

Asideros: Según tarjeta ó cromado mate

4 ejemplos para un puesto de trabajo

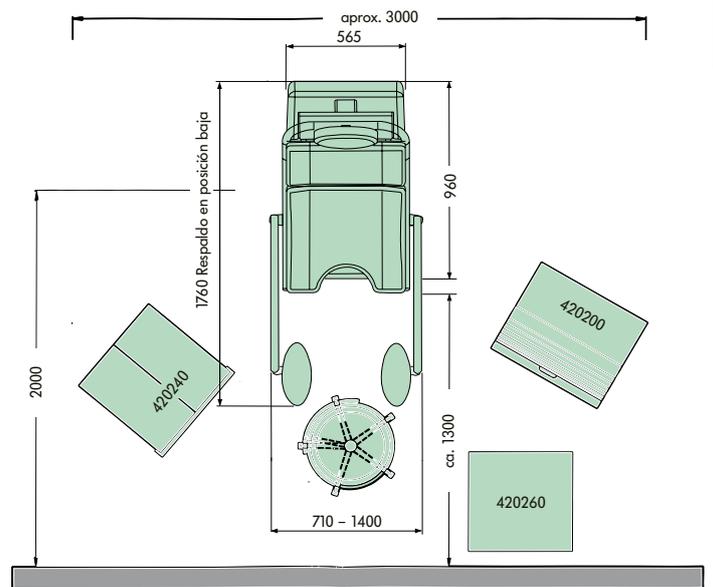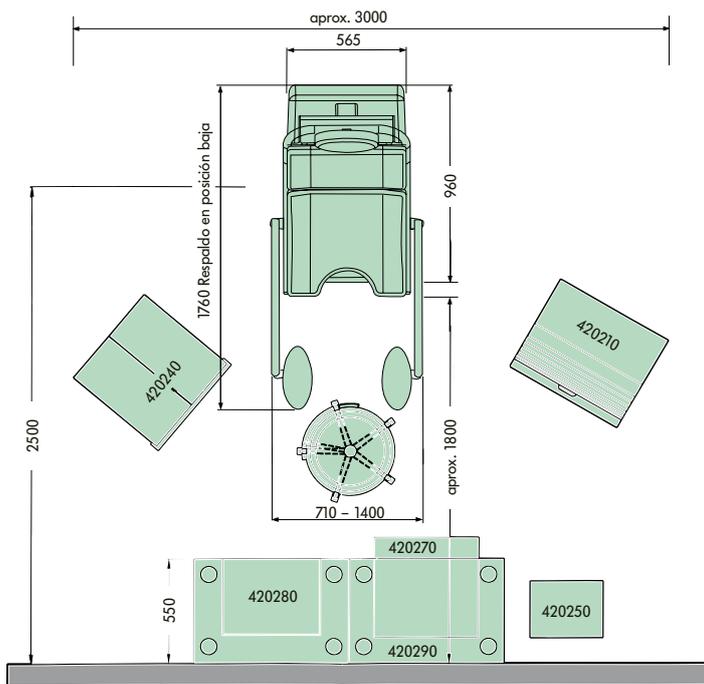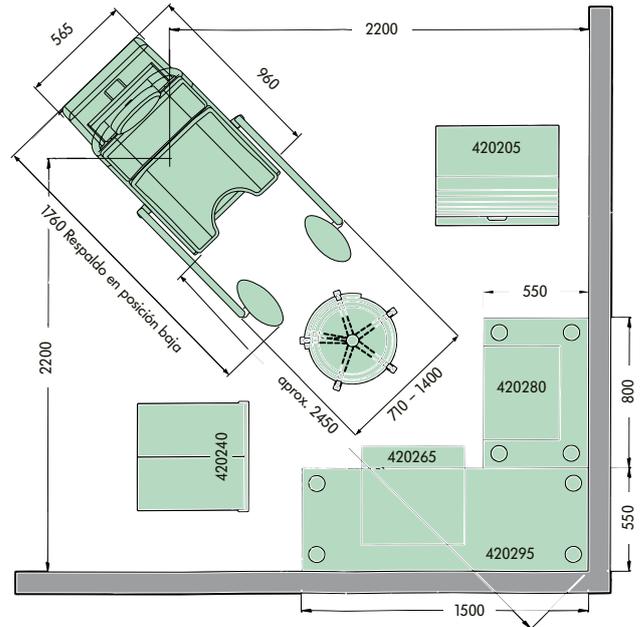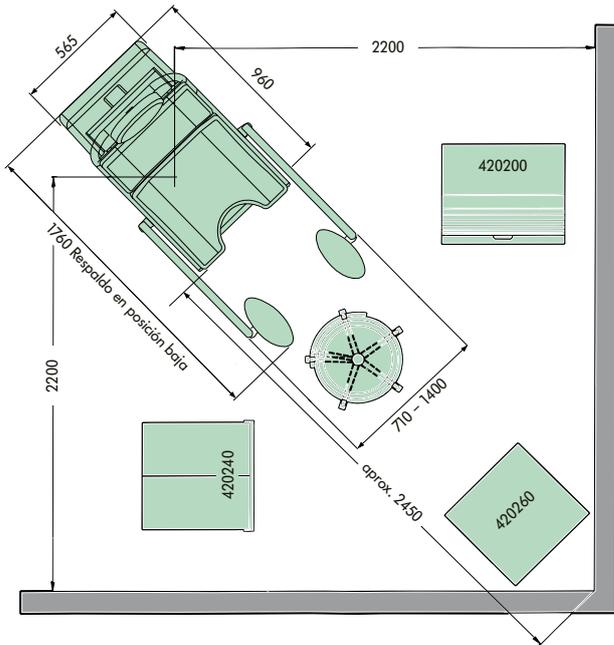

En el caso de instalación fija del sillón, el cable tiene que quedar debajo de la placa base. (960 x 565 mm)
Dentro de esta zona, el sillón se puede desplazar.

Ejemplos para combinaciones de colores de los sillones medi-matic® 115



azul caribe 82
aluminio gris RAL 9007



verde menta 80
verde abeto RAL 1703020



carmin 92
aluminio gris RAL 9007



azul marino 83
aluminio gris RAL 9007

Ejemplos para combinaciones de colores de los sillones arco



gris titanio 91
aluminio gris RAL 9007



verde musgo 81
aluminio gris RAL 9007



gris granito 89
pardo cobre RAL 8004




marrón naturale 93
marfil claro RAL 1015


Colores para barnizados, tapizados, piezas de plástico y encimeras




Barnizados




blanco grisáceo RAL 9002



blanco puro RAL 9010



gris alabastro RAL 0007500*



gris luminoso RAL 7035



gris antracita RAL 7016




negro intenso RAL 9005



aluminio blanco RAL 9006



aluminio gris RAL 9007



amarillo colza RAL 1009050*



amarillo señales RAL 1003



naranja RAL 0506060*



marfil claro RAL 1015




arena RAL 0607030*



pardo cobre RAL 8004



roja viejo RAL 3014




lila claro RAL 3108010*



verde jade RAL 1808010*



verde abeto RAL 1703020*

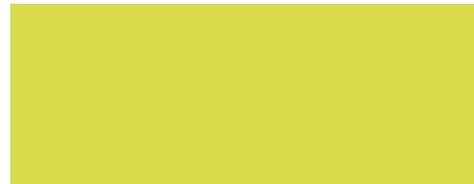

verde lima RAL 1008060*



verde hoja RAL 1206050*



azul turquesa RAL 5018



azul y blanco RAL 2408015*



azul claro RAL 2606030*



azul zafiro RAL 5003

A partir de ahora, Ud. dispone de múltiples posibilidades para configurar el equipamiento de su clínica según su gusto, gracias a los 40 diferentes colores y las posibles combinaciones. No importa que sea de estilo clásico o moderno, elegante o extravagante, siempre encontrará los colores más adecuados.

Haga influir el color de su equipamiento en su paciente, con un tono amarillo alegre, azul tranquilizante o verde relajante. Estamos a su disposición para cualquier consulta.

* Tono intermedio

Cueros artificiales comfort



verde menta 80



verde musgo 81




azul caribe 82



azul marino 83



blanquísimo 84

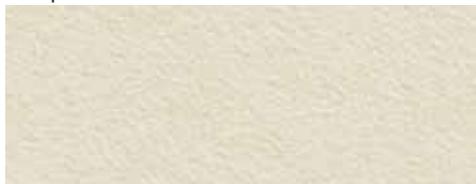

pergamina 85



dorado 86



marrón tabaco 87



gris granito 89



gris platino 90



gris titanio 91




carmín 92




marrón naturale 93

Cueros artificiales classic

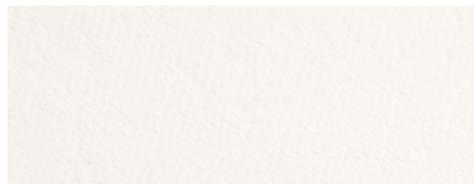


blanco 53

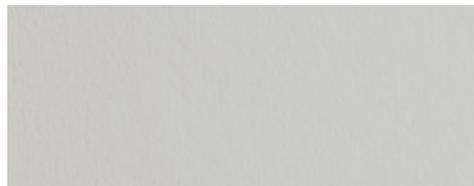

gris plateado 55



océano 52

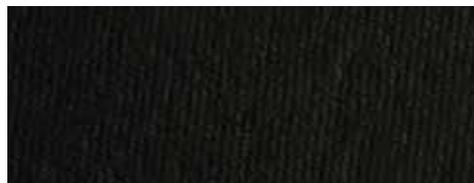


negro 57

Materia plástica




gris plateado

Encimeras

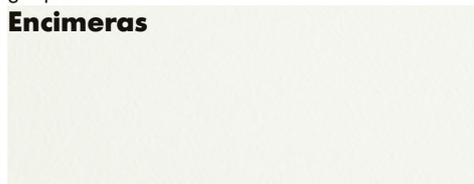

Encimera gris perla 60

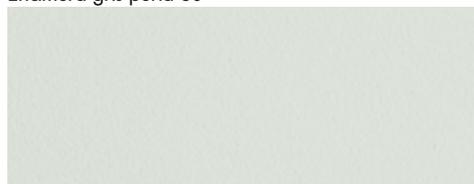

Encimera gris claro 70

Accesorio recomendado:
Detergente para piel artificial
Ref. 02019878
Bote de 50 ml, en paquete de 3 unidades.

Por favor, ver nuestras instrucciones de uso para información detallada sobre la limpieza y la desinfección de los tapizados.



Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG

Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania
Teléfono +49 (0) 23 77-84-0
Fax +49 (0) 23 77-8 41 35
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Delegación: España

SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/ Pollensa, nº 2 – Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfono (91) 6 40 45 14
Fax (91) 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

América Latina

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 (0)11 4811 4642
Fax +54 (0)11 4811 4642
Móvil 0911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de

Todos los productos marcados con las letras CE corresponden, en combinación con nuestros accesorios, a las normas de la ley para productos de medicina (MPG) y a las normas europeas 93/42/CEE



Para su uso detallado por especialidad, rogamos consulten también el manual de usuario.



El programa completo de Schmitz



DIAMOND
Mesas de operaciones con mucho estilo



OPX Mesas de operaciones Para quirófanos y ambulatorios Flexibles y muy fiables



varimed® Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos



STL 285, STS 282, STX 280
Sistemas de transporte para urgencias, ambulatorios, cuidados intensivos y radiografías



varimed® Los carros funcionales – nuestros expertos para el trabajo cotidiano en el hospital



varimed® Mobiliario médico para reconocimiento y tratamiento



Partura® La cama de partos Schmitz cómoda y segura – para una obstetricia preventiva