



ERAGON

Sistema de pinzas y tijeras bipolares modular • ergonómico • seguro

ERAGON

El nuevo sistema ERAGON bipolar satisface de manera consecuente las exigencias en cuanto a economía, funcionalidad y ergonomía.

Con ERAGON usted dispone de un sistema modular económico que incluye una amplia gama de mandíbulas. Gracias al nuevo sistema Click-It, tanto el montaje como el desmontaje resultan muy fáciles, pudiéndose elegir entre una gran variedad de diferentes mandíbulas.

El sistema ERAGON evita todo tipo de movimientos innecesarios de las articulaciones, descartando casi por completo el riesgo de magullar involuntariamente el tejido o

estructuras finas. Gracias al aislamiento completo que también cubre la zona de las articulaciones, el trabajo resulta absolutamente seguro. La coagulación se realiza única y exclusivamente en los puntos deseados.

Como las mandíbulas de las pinzas de agarre y de disección cierran de forma casi paralela, es posible agarrar el tejido de manera uniforme asegurando un alto grado de seguridad y sensibilidad de tacto al agarrar y disecar el tejido. La tijera bipolar es idónea para estructuras tisulares tanto finas como gruesas brindando una extraordinaria capacidad de corte.

Con el fin de facilitarle el trabajo al cirujano, se ha adaptado la ergonomía del mango ERAGON a los requisitos individuales del usuario teniendo en cuenta los diferentes campos de aplicación así como los distintos tamaños de manos y dedos, asegurando así un trabajo cómodo y relajado.

El mecanismo de las articulaciones de nuestro sistema bipolar de pinzas y tijeras ha demostrado su extraordinaria robustez en intervenciones quirúrgicas, incluso en intervenciones de larga duración o con frecuentes cambios de instrumentos.

Un diseño completamente novedoso del mecanismo articular evita todo riesgo de magullar involuntariamente el tejido o estructuras finas.






Gracias al nuevo sistema Click-It el montaje y el desmontaje de los distintos componentes resultan mucho más fáciles. Además, el diseño modular cumple con los requisitos de higiene.





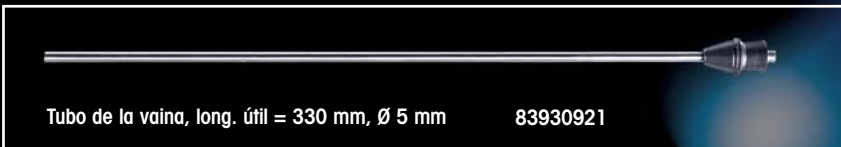




Desarrollado por profesionales para profesionales: El mango ERAGON de una ergonomía excepcional y sometido a prueba por numerosos cirujanos ha sido calificado de altamente eficaz. Su diseño sin igual le permite al usuario manejar el instrumento en cualquier posición sin menoscabo del confort o de la seguridad.



Mango ergonómico,
giratorio



839300102

Elementos interiores ERAGON	Número de pedido de elemento interior	Instrumentos completos ERAGON (incluidos mango y tubo de la vaina)
 Pinza de agarre y disección	83930031	839300312
 Pinza de agarre y disección "Disector de Maryland"	83930032	839300322
 Pinza de agarre y disección "Dolphin"	83930033	839300332
 Pinza de agarre, fenestrada	83930034	839300342
 Pinza de disección "Hasskamp"	83930035	839300352
 Pinza de esterilización "Hasskamp"	83930036	839300362
 Tijera de Metzenbaum	83930041	839300412